



# 平面耳挂式三层一次性使用口罩

有效阻隔飞沫传播




## —● 规格 ●—

材质：无纺布，熔喷布

尺寸：95\*175mm

颜色：浅蓝色

包装：1盒50只，1箱20盒

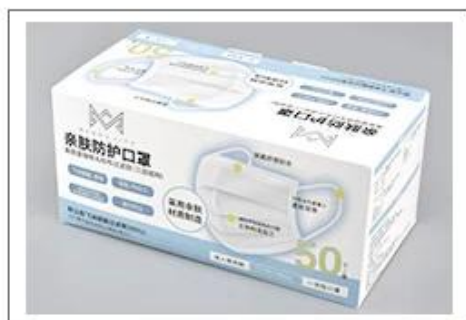

# —● 特色描述 ●—

三层防护，有效阻挡飞沫传播


## 第一层：纺粘无纺布

吸附体内呼出的热气，令皮肤干爽舒适




## 第二层：熔喷布

过滤空气中的非油性颗粒物

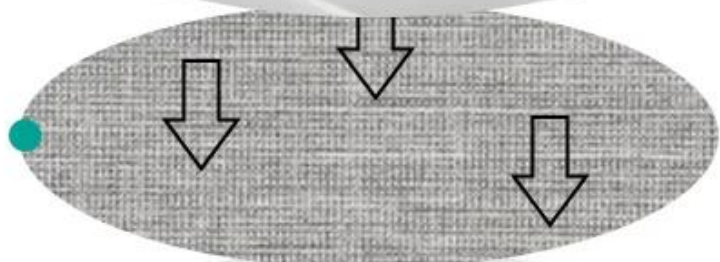

## 第三层：纺粘无纺布

有效阻隔飞沫传播

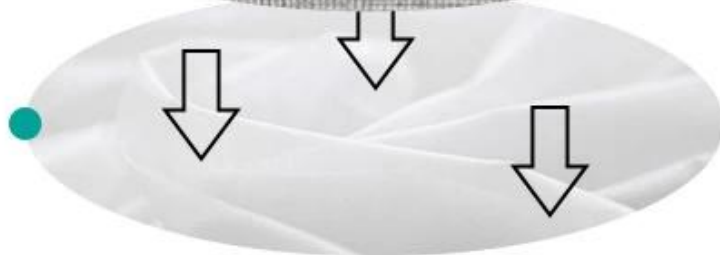

# 低阻力自由呼吸

高弹松紧带，安全舒适



## 3D设计，紧密贴合面部



# 检测报告

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)

报告编号: No. 北京质检(2015) 013

产品名称: 特种劳动防护用品  
单元名称: 自吸过滤式防颗粒物呼吸器  
企业标准: [redacted]  
交货单位: [redacted]  
检验类别: 生产许可证检验  
报告日期: 2015年12月30日

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)

序号	检测项目	技术要求	检测结果	判定
1	外观	符合GB 26161-2013第4.1条	符合	合格
2	重量	符合GB 26161-2013第4.2条	符合	合格
3	呼吸阻力	符合GB 26161-2013第4.3条	符合	合格
4	滤尘效率	符合GB 26161-2013第4.4条	符合	合格
5	呼气阻力	符合GB 26161-2013第4.5条	符合	合格
6	吸气阻力	符合GB 26161-2013第4.6条	符合	合格
7	密封性	符合GB 26161-2013第4.7条	符合	合格
8	佩戴舒适性	符合GB 26161-2013第4.8条	符合	合格
9	标识	符合GB 26161-2013第4.9条	符合	合格
10	材料	符合GB 26161-2013第4.10条	符合	合格

从材质到各功能上所有检测项目全部合格



# —● 佩戴操作方法 ●—

## 步骤1:

打开口罩，将有鼻夹的朝上



## 步骤2:

口罩紧贴面部和下巴，  
把两个耳带分别戴在耳朵上



## 步骤3:

将双手手指置于内金属棒的上方，  
从中间向两侧按照鼻梁形状  
向内按压，直到鼻梁被压成鼻梁  
的形状



## Step4:

向下拉伸口罩，使口罩不留褶皱，  
更好覆盖鼻子、嘴巴



# —● 摘除操作方法 ●—

## 步骤1:

用手慢慢拉开耳带，  
不要触碰口罩污染面



## 步骤2:

将口罩左右对折



## 步骤3:

将口罩放入密封袋，丢入垃圾箱





警示!!!

错误使用将无法达到防尘效果

